

Accu-Chek® FlexLink Plus
et guide d'insertion Accu-Chek® LinkAssist Plus

Accu-Chek® TenderLink
Accu-Chek® Rapid-D Link

Mode d'emploi des sets de perfusion Accu-Chek



Accu-Chek® FlexLink Plus




Accu-Chek® TenderLink




Accu-Chek® Rapid-D Link

Accu-Chek® FlexLink Plus

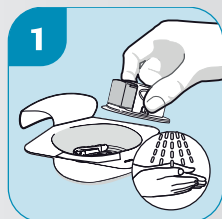


1

Se laver les mains
Désinfecter la zone à piquer
Retirer le set de perfusion de son emballage

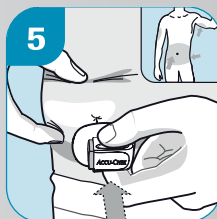


5

Pincer la peau avec le pouce et l'index.
Insérer la canule en téflon selon un angle de 90° avec un geste rapide et continu

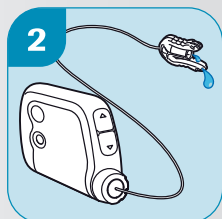


2

Remplir avec de l'insuline le dispositif tubulaire à l'aide du programme de remplissage du cathéter de la pompe (mettre la pompe en position verticale)

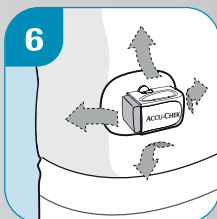

6

Appuyer fermement sur l'adhésif afin que celui-ci adhère sur toute la surface de peau

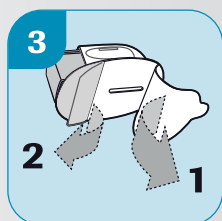

3

Enlever les deux parties du film protecteur




7

Retirer le boîtier
L'aiguille-guide se rabat automatiquement dans le boîtier



4

Appuyer à fond sur le bouton de déclenchement bleu
L'aiguille-guide s'active (« clic »)

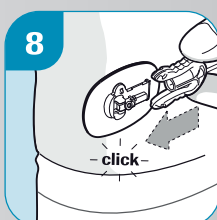

8

Raccorder le dispositif tubulaire rempli au système de connexion
Démarrer la pompe
Remplir la canule en téflon à l'aide d'un bolus d'insuline de 0,7 unités

Accu-Chek® TenderLink



Se laver les mains
Désinfecter la zone
à piquer
Retirer le set de perfusion
de son emballage



Retirer de l'arrière le film
protecteur de l'adhésif
Appuyer fermement
l'embase autoadhésive
sur la peau



Rabattre l'adhésif avec
l'index
Détacher de l'avant le film
protecteur de l'adhésif
et retirer la protection de
l'aiguille

Pincer la peau avec le
pouce et l'index


Introduire la canule du set
de perfusion sous la peau
selon un angle de 20-45°



Remplir avec de l'insuline
le dispositif tubulaire à
l'aide du programme de
remplissage du cathéter de
la pompe (mettre la pompe
en position verticale)




Appuyer fermement
l'embase autoadhésive
sur la peau
Retirer l'aiguille-guide
en appuyant légèrement
sur les deux côtés du
dispositif

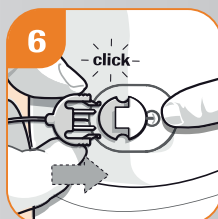


Raccorder le dispositif
tubulaire rempli au système
de connexion.
Démarrer la pompe
Remplir la canule en
téflon à l'aide d'un bolus
d'insuline de 0,7 unités

Accu-Chek[®] Rapid-D Link

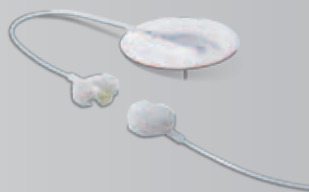


1
Se laver les mains
Désinfecter la zone
à piquer
Retirer le set de perfusion
de son emballage

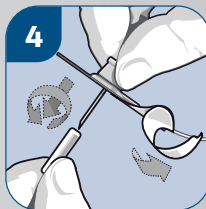


4
Tenir la poignée de la
canule avec le pouce et
l'index

Retirer le film protecteur
de l'embase autoadhésive
avec l'autre main, puis
l'emballage de protection
de la canule en acier

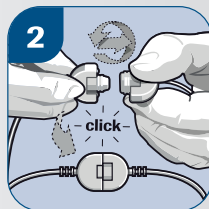

2
Tenir les deux extrémités
du dispositif de couplage
de la canule et du dis-
positif tubulaire de sorte
qu'ils forment une croix.
Les connecter en effec-
tuant un quart de tour
dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à
entendre un « clic ».

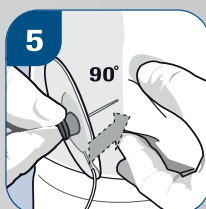


5
Pincer la peau avec le
pouce et l'index


Introduire la canule ra-
pidement et directement
(selon un angle de 90°)

Appuyer fermement
l'embase autoadhésive sur
la peau

Plier légèrement sur le
côté la poignée de la
canule pour la détacher

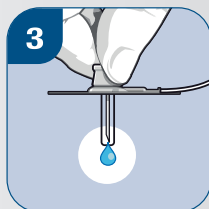

3
Remplir avec de l'insuline
le dispositif tubulaire à
l'aide du programme de
remplissage du cathéter
de la pompe (mettre
la pompe en position
verticale)

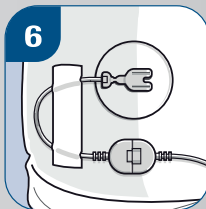

6
Former une boucle avec
le dispositif tubulaire
pour réduire la tension et
fixer cette dernière avec
un sparadrap

Accu-Chek® LinkAssist Plus

Guide d'insertion pour set de perfusion Accu-Chek® FlexLink Plus



1

Se laver les mains
Désinfecter la zone à piquer
Retirer le set de perfusion de son emballage
Démarrer le programme de remplissage du cathéter



6

Appuyer sur le bouton de déclenchement



2

Introduire la canule en téflon dans le guide d'insertion de sorte que les deux boutons bleus soient face à face



7

Retirer le guide d'insertion



3

2

1

Enlever les deux parties du film protecteur



8


Remettre l'élément d'armement en position initiale



4

Retirer à fond l'élément d'armement
L'aiguille-guide s'active «click»

Important ! Appuyer le pouce sur la surface sur laquelle se trouve «Accu-Chek»

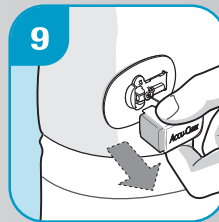


9

Retirer le boîtier
L'aiguille-guide se rabat automatiquement dans le boîtier



5


Appuyer contre la peau le guide d'insertion placé sur la zone à piquer de sorte que le bouton de sécurité bleu soit pressé vers le haut

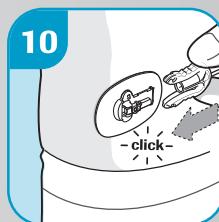

10

Raccorder le dispositif tubulaire rempli au système de connexion
Démarrer la pompe
Remplir la canule en téflon à l'aide d'un bolus d'insuline de 0,7 unités

Changement du set de perfusion

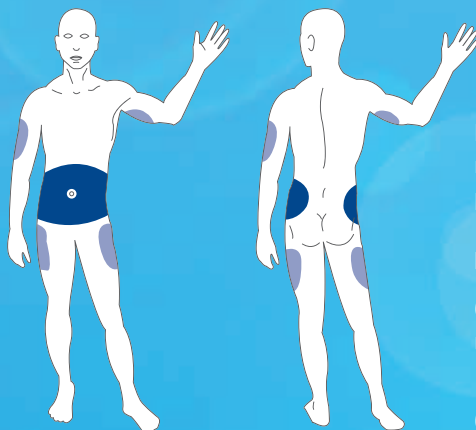

Recommandé



Possible

Pour éviter des irritations cutanées, des inflammations et des indurations, il est indispensable de procéder au changement régulier de la canule.

Notre recommandation :

Canules en téflon :
remplacer tous les 2 à 3 jours
(au bout de 3 jours maximum)

Canules en acier :
remplacer tous les 1 à 2 jours
(au bout de 2 jours maximum)

Dispositif tubulaire :
Ne remplacez le dispositif tubulaire qu'à
l'introduction d'une nouvelle ampoule ou
au bout de 6 jours au maximum.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition.

Appelez la ligne d'assistance téléphonique gratuite pour pompes à insuline au 0800 11 00 11 ou envoyez un courrier électronique à l'adresse e-mail diabetesservice.ch@roche.com.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FLEXLINK PLUS, ACCU-CHEK RAPID-D LINK, ACCU-CHEK RAPIDLINK, ACCU-CHEK TENDERLINK, ACCU-CHEK LINKASSIST PLUS, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO sont des marques de Roche.



www.accu-chek.ch
Roche Diagnostics (Suisse) SA
CH-6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®